

SILVER CREST®



NACKEN-MASSAGEKISSEN MIT AKKU SMKA 2000 A4


DE AT CH





NACKEN-MASSAGEKISSEN MIT AKKU

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 435808_2304



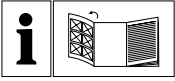

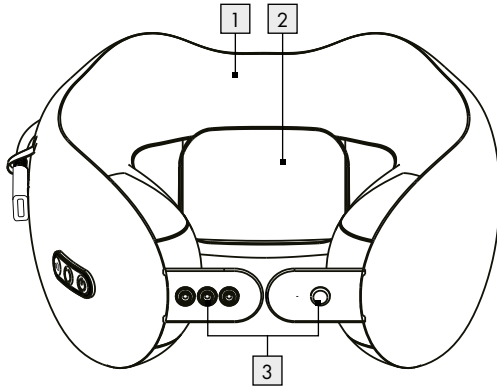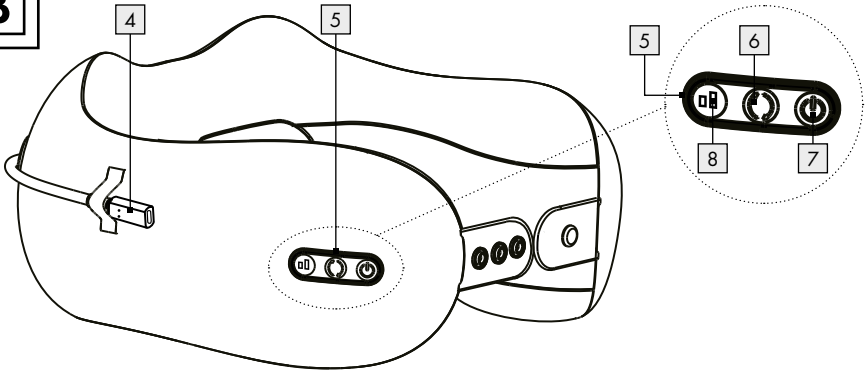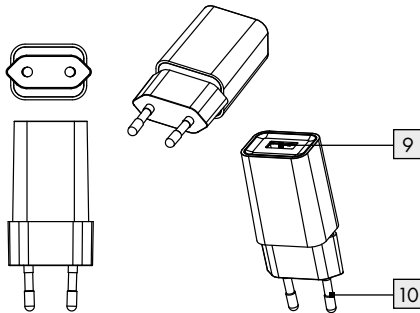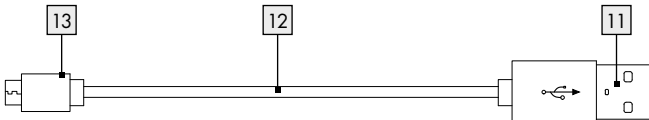




DE



A**B****C****D**

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	Seite	6
Teilebeschreibung.....	Seite	6
Technische Daten.....	Seite	7
Lieferumfang.....	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus.....	Seite	9
Vor der Inbetriebnahme	Seite	10
Akku laden.....	Seite	10
Inbetriebnahme	Seite	11
Produkt ausschalten.....	Seite	11
Reinigung und Pflege	Seite	11
Lagerung	Seite	12
Fehlerbehebung	Seite	12
Entsorgung	Seite	12
Garantie	Seite	14
Abwicklung im Garantiefall.....	Seite	14
Service.....	Seite	14

Legende der verwendeten Piktogramme

	Nur in trockenen Innenräumen verwenden.		Schutzklasse II
	Niedrige/hohe Rotationsgeschwindigkeit	IP20	Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 12,5 mm
	EIN-/AUS-Taste		Rotationsbewegung im Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
CE	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.	ta	Höchste Bemessungs-Umgebungstemperatur
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Verwenden Sie das Steckernetzteil nicht, wenn die Stifte des Steckers beschädigt sind.
	SNT (Schaltnetzteil)		Umschlossener Sicherheitstransformator

Nacken-Massagekissen mit Akku SMKA 2000 A4

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist zur Nacken-Massage bei Personen bestimmt. Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch in trockenen Innenräumen vorgesehen. Es ist nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen und kann nicht eine ärztliche Behandlung ersetzen. Eine andere Verwendung

als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidriger Anwendung liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

● Teilebeschreibung


- 1 Massagekissen
- 2 Massageköpfe
- 3 Einstellgurt mit Druckknöpfen
- 4 Anschlussbuchse
- 5 Bedienfeld
- 6 Rotation-Taste (im Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn) mit Kontrollleuchte
- 7 EIN-/AUS-Taste mit Kontrollleuchte
- 8 Taste für niedrige/hohe Rotationsgeschwindigkeit mit Kontrollleuchte
- 9 USB-Anschluss
- 10 Steckernetzteil
- 11 USB-Typ-A-Stecker
- 12 USB-Kabel
- 13 USB-Typ-C-Stecker

● Technische Daten

Steckernetzteil

Name oder Handelsmarke
des Herstellers,
Handelsregisternummer
und Anschrift:

Xiamen Keli Electronics
Co.,Ltd
91350211737865674J
No.19, XingLin North 3rd
Road, Jimei District, Xiamen,
Fujian, China

Modellkennung: SW-050100
Eingangsspannung: 100-240V~
Eingangswchsel-
stromfrequenz: 50/60Hz
Ausgangsspannung: 5,0V===
Ausgangsstrom: 1,0A
Ausgangsleistung: 5,0W
Durchschnittliche
Effizienz im Betrieb: 73,7%
Leistungsaufnahme
bei Nulllast: 0,10W
Eingangsstrom: 0,5 A
Höchste Bemessungs-
Umgebungs-
temperatur (ta): 45 °C
Schutzklasse: II/

Massagekissen

Eingangsspannung: 5,0V===
Eingangsstrom: 1,0A
Akku: Lithium-Ionen
3,7V/2000mAh
(nicht austauschbar)
Betriebsdauer: max. 15 Minuten
(automatische Abschaltung)

● Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor dem ersten Gebrauch.

1 Nacken-Massagekissen (mit Akku)
1 Steckernetzteil
1 USB-Kabel
1 Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen. Es sind keine Maßnahmen seitens der Anwender erforderlich, um das Produkt auf 50 oder 60Hz einzustellen. Das Produkt stellt sich automatisch auf 50 bzw. auf 60Hz ein.

**BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITS-
HINWEISE UND ANWEISUNGEN
FÜR DIE ZUKUNFT AUF!**



 WARNUNG!

LEBENS- UND UN-

**FALLGEFAHR FÜR KLEIN-
KINDER UND KINDER!** Lassen

Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.

⚠ **VORSICHT!** Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug! Kinder können die Gefahren im Umgang mit elektrischen Produkten nicht erkennen.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 14 Jahre und beaufsichtigt.

⚠ **WARNUNG!** Strangulationsgefahr! Das Produkt enthält einen Einstellgurt mit Druckknöpfen 3, der um den Hals gelegt wird. Achten Sie darauf, dass der Einstellgurt mit Druckknöpfen 3 bei Bewegung nicht eingeklemmt werden kann. Andernfalls besteht Strangulations- und Verletzungsgefahr.

- Das Ausgangskabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Produkt verschrottet werden.
- ⚠ **WARNUNG!** Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
- ⚠ **WARNUNG!** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die abnehmbare Versorgungseinheit, die mit diesem Produkt geliefert wird.
- Stechen Sie keine Nadeln oder andere spitze Gegenstände in das Massagekissen 1.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt oder das Steckernetzteil 10 niemals mit feuchten Händen und verwenden Sie es nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil 10.
- Stellen Sie sicher, dass die Informationen auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen.
- Im Falle einer Funktionsstörung ziehen Sie bitte das Steckernetzteil 10 aus der Steckdose.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und reparieren Sie es nicht selbst.

Defekte Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung das Steckernetzteil 10 aus der Steckdose.
- Halten Sie das USB-Kabel 12 von heißen Oberflächen, scharfen Kanten und mechanischen Belastungen fern.
- Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es an einem anderen Ort platzieren.




WARNUNG! BRANDGEFAHR!

- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe oder unter Gardinen, Regalen oder anderen entzündlichen Materialien.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen, verbrannten, entzündeten, erkrankten oder verletzten Haut- und Körperteilen und -regionen. Holen Sie im Zweifelsfall vor der Anwendung ärztlichen Rat ein.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn Sie Verletzungen am Nacken oder Nackenschmerzen haben.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen

Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHAND- SCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, welcher nicht durch den Benutzer ersetzt werden kann. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Produkt einen Akku enthält.

● Vor der Inbetriebnahme

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

Hinweis: Das Produkt darf nur mit dem eingebauten Akku verwendet werden.

● Akku laden

Hinweis: Vor der ersten Verwendung muss der Akku des Produkts ca. 120 Minuten aufgeladen werden. Auch bei späteren Ladevorgängen ist eine Ladezeit von ca. 120 Minuten erforderlich.

Hinweis: Das Produkt kann nur mithilfe des Steckernetzteils **10** und des USB-Kabels **12** aufgeladen werden.

Hinweis: Während des Ladevorgangs blinkt die EIN-/AUS-Taste **7** rot. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, leuchtet die EIN-/AUS-Taste **7** dauerhaft rot.

Hinweis: Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Hinweis: Wenn der Akku fast vollständig entladen ist, drehen sich die Massageköpfe **2** nicht mehr, die EIN-/AUS-Taste **7** leuchtet rot und blinkt ca. 15 Sekunden lang.

- Um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden, schalten Sie das Produkt immer aus, bevor Sie den Akku aufladen. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste **7** einmal und die grüne Kontrollleuchte erlischt dann (siehe Abb. B).
- Stecken Sie den USB-Typ-C-Stecker **13** des USB-Kabels **12** in die Anschlussbuchse **4** des Produkts (siehe Abb. B und D).
- Stecken Sie den USB-Typ-A-Stecker **11** des USB-Kabels **12** in den USB-Anschluss **9** des Steckernetzteils **10** (siehe Abb. C und D).
- Stecken Sie das Steckernetzteil **10** (siehe Abb. C) in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, die den Produkthanforderungen entspricht (siehe „Technische Daten“).

Die Kontrollleuchte der EIN-/AUS-Taste **7 zeigt den Ladestatus des Akkus wie folgt an:**

Akkustand	Anzeige der Kontrollleuchte Farbe
Laden	Das rote Licht schaltet sich ein und blinkt.
Vollständig aufgeladen	Das rote Licht leuchtet durchgehend.
Hohe Akkuladung	Grünes Licht leuchtet durchgehend.
Mittlere Akkuladung	Gelbes Licht leuchtet durchgehend.
Niedrige Akkuladung	Rotes Licht blinkt für ca. 15 Sekunden.

● Inbetriebnahme

- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 15 Minuten. Bei einer längeren Verwendung kann es zu Verspannungen kommen, die durch Überstimulation der Muskeln verursacht werden.
- Das Produkt schaltet sich nach ca. 15 Minuten automatisch aus. Lassen Sie es mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten, um Überhitzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt niemals im Schlaf oder im Liegen. Eine zusätzliche mechanische Belastung des Nackens gegen die Massageköpfe [2] kann zu Verletzungen oder Schmerzen im Nacken führen.
- Legen Sie sich das Massagekissen [1] um den Nacken und befestigen Sie es mithilfe des Einstellgurts mit Druckknöpfen [3] (siehe Abb. A).
- Schalten Sie das Massagekissen [1] ein, indem Sie die EIN-/AUS-Taste [7] auf dem Bedienfeld [5] ca. 1 Sekunde lang drücken (siehe Abb. B). Die Kontrollleuchte der EIN-/AUS-Taste [7] schaltet sich ein und leuchtet durchgehend grün. Die Massageköpfe [2] drehen sich im Uhrzeigersinn.
- Drücken Sie die Rotation-Taste (im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn) [6] auf dem Bedienfeld [5], um die Drehrichtung der Massageköpfe [2] umzukehren (siehe Abb. B). Die Massageköpfe [2] drehen sich nun gegen den Uhrzeigersinn und die Farbe der Kontrollleuchte wechselt von blau zu grün.
- Drücken Sie die Taste für niedrige/hohe Rotationsgeschwindigkeit [8] auf dem Bedienfeld [5], um die Drehgeschwindigkeit der Massageköpfe [2] zu erhöhen (siehe Abb. B). Die Drehgeschwindigkeit der Massageköpfe [2] ist in zwei Stufen einstellbar. Die blaue Kontrollleuchte steht für eine niedrige Geschwindigkeit, die grüne Kontrollleuchte für eine höhere Geschwindigkeit.

● Produkt ausschalten

- Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste [7] auf dem Bedienfeld [5], um das Produkt auszuschalten

(siehe Abb. B). Alle Kontrollleuchten auf dem Bedienfeld [5] erlöschen und die Massageköpfe [2] hören auf sich zu drehen. Nach ca. 15 Minuten schaltet sich das Produkt automatisch aus.

- Lassen Sie das Produkt mindestens für 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten, um Überhitzung zu vermeiden.


Die Kontrollleuchte des Bedienfelds [5] zeigt den Betriebsstatus des Produkts wie folgt an:

Status	EIN-/AUS-Taste [7]
Das Produkt ist eingeschaltet.	Das grüne Licht schaltet sich ein und leuchtet durchgehend.
Das Produkt ist ausgeschaltet.	Das grüne Licht erlischt.

Status	Rotation-Taste (im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn) [6]
Im Uhrzeigersinn drehend	Blaues Licht
Gegen den Uhrzeigersinn drehend	Grünes Licht

Status	Taste für niedrige/hohe Rotationsgeschwindigkeit [8]
Niedrige Rotationsgeschwindigkeit	Blaues Licht
Hohe Rotationsgeschwindigkeit	Grünes Licht

● Reinigung und Pflege

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Ziehen Sie vor der Reinigung stets das Steckernetzteil [10] aus der Steckdose und den USB-Typ-C-Stecker [13] aus

- der Anschlussbuchse [4]. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- **⚠️ WARNUNG!** Tauchen Sie das Produkt oder das Steckernetzteil [10] niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Verbinden Sie das Steckernetzteil [10] erst wieder mit dem Massagekissen [1], wenn es vollständig trocken ist.
 - Verwenden Sie zur Reinigung des Massagekissens [1] keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel. Andernfalls kann es beschädigt werden.
 - Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Massagekissen [1] eindringen.
 - Reinigen Sie das Produkt mit einem Tuch oder feuchten Schwamm und eventuell etwas flüssigem Feinwaschmittel.

● Lagerung

- Lassen Sie das Massagekissen [1] vor der Lagerung abkühlen.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf dem Massagekissen [1] ab.
- Lagern Sie das Produkt in trockener, sauberer Umgebung, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

● Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Der Akku ist möglicherweise entladen.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku laden“).
Das Produkt schaltet sich während des Gebrauchs aus.	Das Produkt schaltet sich nach ca. 15 Minuten automatisch aus, um Überhitzung zu vermeiden.	Lassen Sie das Produkt mindestens für 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
Die Massageköpfe [2] drehen sich langsam.	Die mechanische Belastung der Massageköpfe [2] ist zu hoch.	Drücken Sie den Nacken nicht zu fest gegen die Massageköpfe [2].
Das Produkt kann nicht durch Drücken der EIN-/AUS-Taste [7] eingeschaltet werden.	Die EIN-/AUS-Taste [7] wird nicht lange genug gedrückt.	Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste [7] ca. eine Sekunde lang.
Das Produkt kann nicht aufgeladen werden.	Der Akkustand ist ausreichend und somit ist kein Aufladen erforderlich.	Laden Sie das Produkt nur auf, wenn der Akkustand mittel oder niedrig ist.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunst-

stoffe/20-22: Papier und Pappe/
80-98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung und wird getrennt gesammelt.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 435808_2304) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● **Service**

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG10690
Version: 09/2023

Stand der Informationen: 08/2023
Ident.-No.: HG10690082023-DE



IAN 435808_2304

