




Bain de pieds bouillonnant Voetbubbelbad

Mode d'emploi - A lire attentivement s.v.p.!
Gebruiksaanwijzing - A.u.b. zorgvuldig lezen!

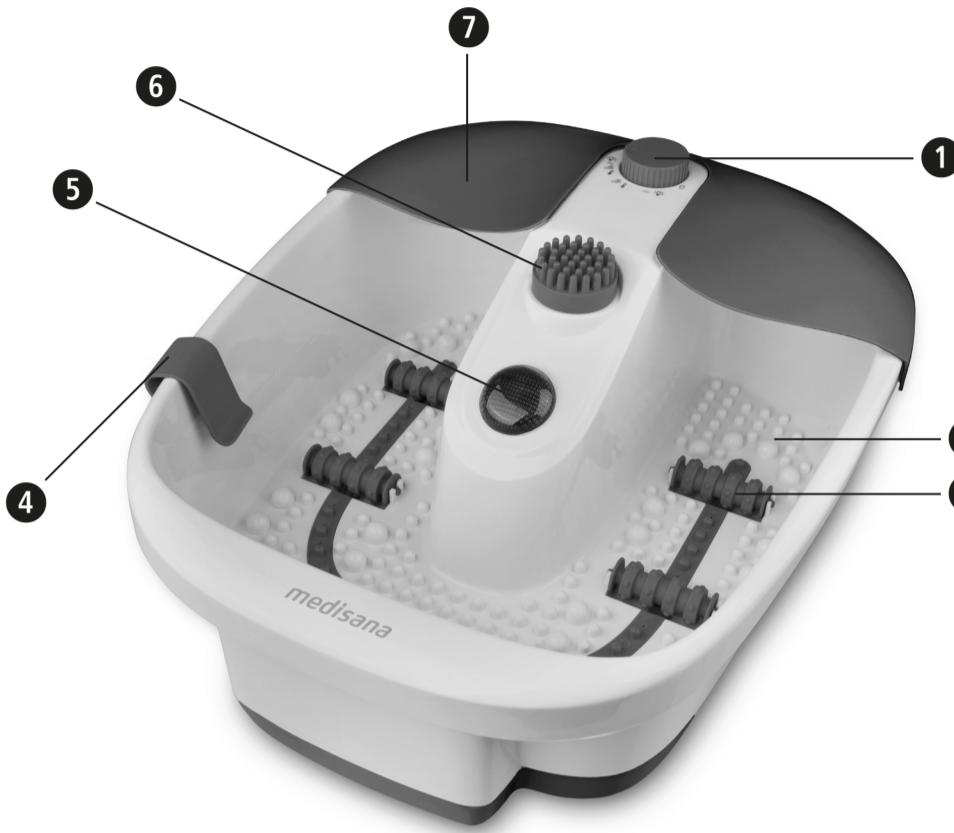

Ne convient pas aux enfants en bas âge (0-3 ans) !
Niet geschikt voor kleine kinderen (0-3 jaar)!

Légende



Verklaring van de symbolen



IMPORTANT BELANGRIJK

Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.

Volg de gebruiksaanwijzing op! Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.



AVERTISSEMENT WAARSCHUWING

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.




ATTENTION OPGELET

Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.



REMARQUE AANWIJZING
Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation. Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.

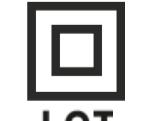

Utilisez l'appareil en lieu clos uniquement !
Gebruikt u het apparaat alleen in gesloten ruimten!

Classe de protection II Beschermingsklasse II



N° de lot LOT-nummer



Fabricant Producent

1 BE
8

IAN 499375_2204



FR/BE Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettez-lui impérativement ce mode d'emploi à disposition.



Alimentation en courant

- Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation électrique, veillez à ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de l'alimentation secteur.
- Vérifier que l'appareil est éteint avant d'insérer la fiche secteur dans une prise de courant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, l'appareil ne doit plus être utilisé. Pour des raisons de sécurité, le cordon d'alimentation doit être remplacé que par un centre de réparations agréé.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation si vos pieds se trouvent dans l'eau et toujours avec des mains sèches.
- Ne jamais essayer de rattraper un appareil tombé dans l'eau. Retirer la fiche secteur immédiatement.
- Tenir l'appareil, câble secteur compris, à l'écart des surfaces chaudes.
- Éviter tout contact de l'appareil avec des objets pointus ou acérés.
- Ne pas porter, traîner ou tordre l'appareil en tirant sur le cordon secteur et veiller à ne pas pincer le cordon.
- Positionner le câble secteur de manière à éviter tout trébuchement.
- Après l'utilisation, éteindre toutes les fonctions et débrancher la fiche secteur de la prise de courant.

Pour certaines personnes

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à partir du moment où elles sont surveillées ou qu'on leur a montré comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil, car ils sont incapables de réagir à l'hyperthermie.
- Cet équipement ne doit pas être utilisé par les enfants de plus de 3 ans, à moins que le commutateur de fonctions n'ait déjà été réglé par un parent ou un adulte responsable ou qu'on ait suffisamment appris à l'enfant comment manipuler l'appareil en toute sécurité.
- Si l'utilisation provoque des problèmes de santé, interrompez immédiatement l'utilisation et consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes podologiques, souffrez de maladies vasculaires ou de diabète, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil. Si vous souffrez de douleurs ou gonflements inexplicables dans les jambes ou les pieds, de même qu'après une lésion musculaire, consultez votre médecin avant l'utilisation.

- Il est conseillé aux femmes enceintes de consulter leur médecin avant d'entamer les applications.
- Interrompez les massages si vous ressentez des douleurs durant l'application ou si des gonflements apparaissent ensuite.
- La surface de l'appareil devient chaude. Les personnes sensibles à la chaleur doivent utiliser l'appareil avec précaution.

Fonctionnement de l'appareil

- Uniquement utiliser cet appareil conformément au but d'utilisation décrit dans ce mode d'emploi. Tout emploi non conforme annule les droits de garantie.
- L'appareil est conçu pour l'usage domestique, mais non pour l'utilisation commerciale.
- N'utilisez pas l'appareil en plein-air ou dans des pièces humides.
- Posez l'appareil sur une surface ferme et plane ce qui n'est pas sensible à l'humidité.
- Utilisez l'appareil uniquement avec de l'eau et pas avec d'autres liquides.
- Utilisez seulement des produits pour le bain appropriés - sans additifs pour le bain / sels de bain moussants.
- Ne pas soumettre l'appareil à toute la charge de votre corps, il n'est pas conçu pour vous supporter.
- Ne jamais recouvrir l'appareil lors du fonctionnement et ne pas l'utiliser sous des coussins ou couvertures.
- Si l'appareil présente une fuite, il ne doit plus être utilisé.

La fonction chaleur de l'appareil ne convient cependant pas pour réchauffer l'eau versée, mais seulement pour en retarder le refroidissement.



ATTENTION
Posez le bain des pieds bouillonnant medisana sur une surface ferme et plane qui n'est pas sensible à l'humidité. N'utilisez jamais des sels de bain / des additifs pour le bain moussants.

Application

Remplir l'appareil avec de l'eau chaude ou froide jusqu'au repère marqué sur le bord intérieur. Placer l'appareil sur une surface plane et brancher la fiche secteur dans une prise de courant. Installez-vous à présent confortablement devant l'appareil et sélectionnez à l'aide du commutateur de fonctions ① la fonction souhaitée.

- Sélectionnez BAIN BOUILLONNANT & MASSAGE & CHALEUR & LUMIÈRE ROUGE pour stimuler vos pieds par une vibration des picots de massage ② au fond de l'appareil tout en déclenchant une douce chaleur et un bain bouillonnant vivifiant. L'émetteur de lumière rouge ③ est également activé et dégage une agréable chaleur.
- Le réglage BAIN BOUILLONNANT & CHALEUR ne déclenche que les fonctions bain bouillonnant et chaleur.
- Le réglage MASSAGE & LUMIÈRE ROUGE déclenche la fonction massage à l'aide des picots de massage ② de même que la lumière rouge ③. Ce réglage peut également être utilisé sans eau.

Après utilisation, mettez le commutateur de fonctions ① en position 0 (ÉTEINT). Débranchez la fiche de la prise de secteur et videz le cas échéant le bain de pieds bouillonnant. Pour le vider, inclinez l'appareil de sorte que l'eau puisse s'écouler à travers le déversoir en arrière.

Application « massage » supplémentaire

Outre les applications précédemment décrites, le bain de pied bouillonnant medisana dispose aussi d'une autre possibilité de massage avec de l'eau sans avoir à activer l'appareil : Rouleau de massage ① faites rouler le rouleau de massage sur la plante des pieds avec une intensité qui vous soit agréable. Cela active la circulation et exerce un effet vivifiant sur les pieds.

Appareil et éléments de commande

① Commutateur de fonctions :

- 0 = ÉTEINT ;
- = MASSAGE & LUMIÈRE ROUGE ;
- = BAIN BOUILLONNANT & CHALEUR ;
- = BAIN BOUILLONNANT & MASSAGE & CHALEUR & LUMIÈRE ROUGE

② Picots de massage

③ Rouleau de massage (amovible)

④ Support d'accessoires de pédicure

⑤ Emetteur de lumière rouge

⑥ Station d'accessoires de pédicure

⑦ Protection anti-éclaboussures amovible

Éléments fournis

Veuillez vérifier si l'appareil est au complet et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne faites pas fonctionner l'appareil et renvoyez-le à un point de service après-vente.

La livraison inclut :

- 1 bain de pieds bouillonnant medisana
- 3 accessoires de pédicure interchangeables (enleveur de callosités, brosse, massage)
- 1 support d'accessoires de pédicure
- 1 mode d'emploi

Les emballages sont réutilisables ou peuvent être recyclés afin de récupérer les matières premières. Respectez les règles de protection de l'environnement lorsque vous jetez les emballages dont vous n'avez plus besoin. Si vous remarquez lors du déballage un dommage survenu durant le transport, contactez immédiatement votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Veuillez à garder les films d'emballage hors de portée des enfants. Ils risqueraient de s'étouffer!

Nous vous remercions

pour votre confiance et toutes nos félicitations !

Avec le bain de pieds bouillonnant medisana, vous pouvez choyer et détendre vos pieds après une longue journée. Un bain de pieds avec massage dure entre 10 et 15 minutes, prenez le temps d'en faire un ou deux chaque jour. Vous devez cependant veiller à ce que l'appareil refroidisse entièrement avant de le réutiliser! Le Thalassopieds medisana est conçu pour l'utilisation avec de l'eau. Vous pouvez remplir l'appareil avec de l'eau chaude ou froide.

Caractéristiques techniques

Nom et modèle: Bain de pieds bouillonnant medisana, type FS-90L

Alimentation électrique: 220-240V ~ 50/60Hz

Puissance nominale:

Dimensions:

Poids:

Numéro d'article:

Numéro EAN:

40 15588 92070 7

40 15588 92071 4

Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.

La dernière version de ce mode d'emploi est disponible sur le site www.medisana.com

Conditions de garantie et de réparation

Garantie de la société medisana GmbH:

Chère cliente, cher client,
Vous bénéficiez d'une garantie de 3 ans sur cet appareil à partir de la date d'achat. En cas de défauts de ce produit, vous disposez de droits légaux contre le vendeur du produit. Ces droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie représentée ci-après.

Déroulement en cas de garantie

Afin de permettre un traitement rapide de votre problème, veuillez suivre les conseils suivants:

- Si des dysfonctionnements ou d'autres défauts surviennent, contactez d'abord le service après-vente cité ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- Veuillez tenir à disposition pour toutes les requêtes le ticket de caisse et le numéro d'article IAN 499375_2204 comme preuve d'achat.
- Vous pouvez alors envoyer, sans frais de port pour vous, un produit saisi comme défectueux en y joignant la preuve d'achat (ticket de caisse) et en indiquant en quoi consiste le défaut et quand il est survenu. L'adresse d'envoi vous est communiquée par le service après-vente.

Conditions de garantie

Le délai de garantie commence à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse d'origine. Ce document est nécessaire pour prouver l'achat. Si un défaut de matériel ou de fabrication survient dans un délai de trois ans à partir de la date d'achat de ce produit, nous réparons ou remplaçons gratuitement le produit, à notre convenance. Cette prestation de garantie suppose que, dans le délai de trois ans, l'appareil défectueux et la preuve d'achat (ticket de caisse) sont présentés ainsi qu'une courte description écrite indiquant en quoi consiste le défaut et quand il est survenu. Si le défaut est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit. Aucune nouvelle période de garantie ne commence lors de la réparation ou du remplacement du produit. D'éventuels dommages et défauts présents dès l'achat doivent être signalés aussitôt après le déballage. Après expiration de la période de garantie, les réparations nécessaires sont payantes. La prestation de garantie s'applique pour les défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux parties du produit exposées à une usure normale et pouvant donc être considérées comme des pièces d'usure, p. ex. piles, batteries ou pour des dommages sur des parties fragiles, p. ex. commutateurs ou parties en verre. Cette garantie devient caduque si le produit a été endommagé, et n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Une utilisation conforme du produit suppose le strict respect de toutes les consignes exposées dans la notice d'utilisation. Les utilisations et les actions déconseillées dans la notice ou faisant l'objet d'un avertissement doivent être absolument évitées. Le produit est destiné uniquement à l'usage privé et interdit à l'utilisation commerciale. La garantie expire en cas de manipulation abusive et non conforme, d'utilisation de la violence et d'interventions n'ayant pas été effectuées par notre filiale agréée pour le service après-vente.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Allemagne

Service IAN 499375_2204



Tel: 00800 63347262

E-Mail: service.be@medisana.com



Tel: 00800 63347262

E-Mail: service.ch@medisana.com

Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il soit éteint, refroidi et que le cordon secteur soit débranché de la prise de courant.

Videz l'eau et nettoyez l'appareil refroidi avec un chiffon et le cas échéant avec un produit désinfectant.

N'utilisez pas de substances agressives pour le nettoyage comme par ex. des solvants ou crèmes à récurer.

Cela pourrait endommager la surface.

Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais.


Pliez le cordon secteur avec soin pour éviter toute rupture du câble.

<h3



Bain de pieds bouillonnant Voetbubbelpad

Mode d'emploi - A lire attentivement s.v.p.!
Gebruiksaanwijzing - A.u.b. zorgvuldig lezen!

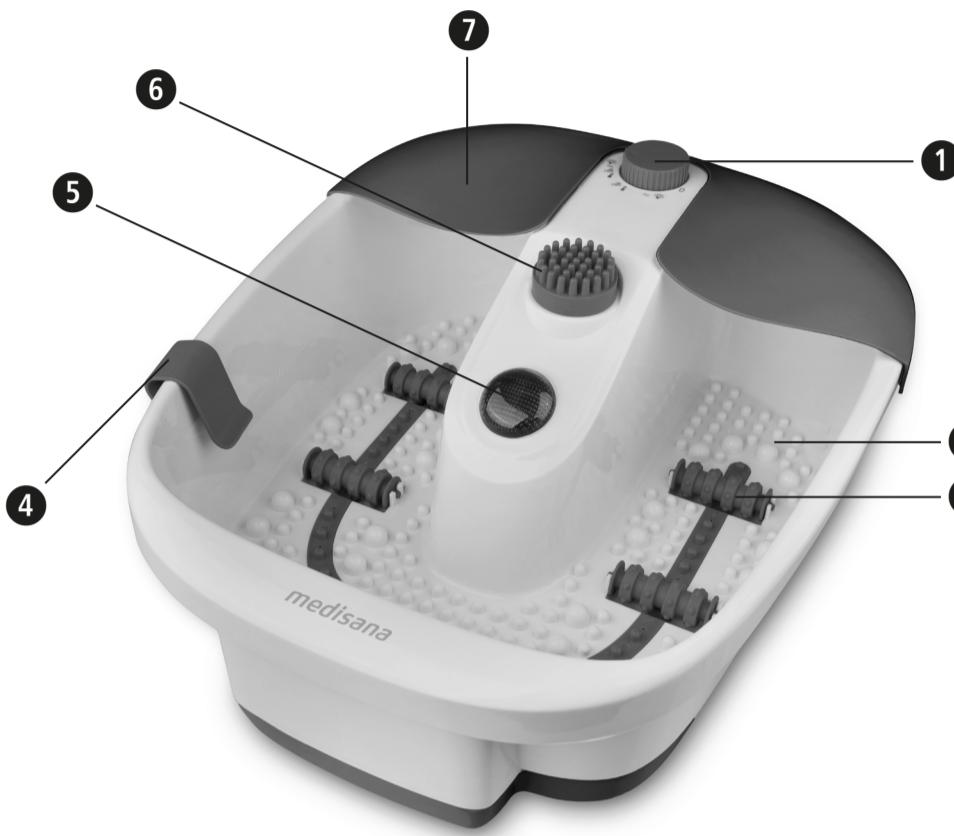

 Ne convient pas aux enfants en bas âge (0-3 ans)!
Niet geschikt voor kleine kinderen (0-3 jaar)!

Légende



Verklaring van de symbolen

IMPORTANT BELANGRIJK

Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.

Volg de gebruiksaanwijzing op! Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.



AVERTISSEMENT WAARSCHUWING

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.



ATTENTION OPGELET

Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.



REMARQUE AANWIJZING

Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation. Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.



Utilisez l'appareil en lieu clos uniquement!
Gebruikt u het apparaat alleen in gesloten ruimten!



Classe de protection II Beschermingsklasse II

N° de lot LOT-nummer



Fabricant Producent



IAN 499375_2204

1 BE



NL/BE Veiligheidsinstructies

 **Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verdergebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.**



over de stroomvoorziening

- Voor u het apparaat aansluit op uw stroomtoevoer, dient u erop te letten dat de netspanning, die op het typeaanduidingsplaatje staat aangegeven overeenkomt met die van uw stroomnet.
- Steek de stekker alleen in het stopcontact, als het apparaat uitgeschakeld is.
- Wanneer het snoer beschadigd is, mag het toestel niet langer worden gebruikt. Om veiligheidsredenen mag het snoer alleen door een erkend servicecenter worden vervangen.
- Raak de stekker nooit aan als u in het water staat en raak de stekker altijd met droge handen aan.
- Raakt nooit een apparaat aan dat in het water gevallen is. Trek meteen de stekker uit het stopcontact.
- Houdt het apparaat en het snoer zover mogelijk uit de buurt van hete oppervlakken.
- Vermijd het contact van het apparaat met spits of scherpe voorwerpen.
- Draag, trek of draai het apparaat nooit aan het snoer en knel het snoer niet af.
- Positioneer het snoer zo dat er geen struikelgevaar ontstaat.
- Schakel alle functies na het gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.

voor bijzondere personen

- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, alsook door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking, of mensen met gebrek aan kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of dat zij behoorlijk werden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en zij daardoor voorloeiende mogelijke gevaren begrijpen.
- Dit toestel is géén speelgoed.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het toestel niet gebruiken, omdat zijn niet in staat zijn op hyperthermie te reageren.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen boven de 3 jaar, tenzij de functieschakelaar door een ouder of toezichtpersoon zo werd vooringesteld of tenzij het kind voldoende weet hoe het apparaat moet worden gebruikt.
- Neem contact op met uw arts, wanneer er zich tijdens gebruik gezondheidsproblemen voordoen. Staak in dat geval onmiddellijk het gebruik van het instrument.
- Indien u onder medische voetproblemen, venenziektes of diabetes lijdt, neem dan eerst contact op met uw arts voordat u het instrument gebruikt. Vraag, in het geval van onverwachte pijn of zwellingen van benen of voeten, of na een verwonding van de spieren, eerst uw arts voordat u het instrument gebruikt.
- In het geval van een zwangerzwangerschap is het raadzaam eerst contact op te nemen met de arts voordat het instrument wordt gebruikt.
- Breek een massage af, als u gedurende een behandeling pijn ondervindt of als er hiernaa zwellingen optreden.
- Het toestel heeft een warm oppervlak. Hittegevoelige personen moeten het toestel dan ook met de nodige voorzichtigheid gebruiken.

- vóór uw vertrouwen en nog van harte gefeliciteerd! Met het voetbubbelpad van **medisana** kunt u uw voeten na een lange dag heerlijk verwennen en tot rust laten komen. U kunt voor een voetbad met massage ongeveer 10 tot 15 minuten de tijd nemen en dagelijks 1 à 2 maal gebruik ervan maken. U moet er echter op letten dat het apparaat na ieder gebruik volledig afgekoeld is, voordat het weer gebruikt wordt!
- Het **medisana** voetbubbelpad is geschikt voor gebruik met water. U kunt het toestel met warm of koud water vullen. De warmtefunctie zorgt echter niet voor het verwarmen van het water, maar zorgt ervoor dat het water niet zo snel afkoelt.

voor het gebruik van het toestel

- Gebruik het apparaat alleen voor doeleinden zoals gesteld in de gebruiksaanwijzing. In alle andere gevallen vervalt de garantie.
- Het toestel is niet bedoeld voor commercieel gebruik, maar uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het instrument niet aan de open lucht of in vochtige ruimtes.
- Plaats het toestel, alvorens het te gebruiken, op een stevig en vlak, vochtbestendig oppervlak.
- Gebruik het toestel alleen met water, niet met andere vloeistoffen.
- Gebruik alleen geschikte badproducten – geen schuimende additieven of badzout.
- Ga niet in het apparaat staan, want een volledig lichaamsgewicht kan het apparaat niet dragen.
- Bedek het apparaat nooit tijdens het gebruik en gebruik het niet onder een kussen of deken.
- Wanneer het water uit het toestel lekt, mag dit niet meer worden gebruikt.



OPGELET

Vergewis u ervan dat het **medisana** voetbubbelpad op een stevig, vlak en vochtbestendig oppervlak staat. Gebruik nooit schuimende badproducten of badzouten.

Gebruiken

Vul het apparaat met warm of koud water tot aan de markering aan de binnenkant. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond en steek dan de stekker in het stopcontact. Ga ontspannen voor het toestel zitten en schakel met de functieschakelaar ① de gewenste functie in.

- Kies **BUBBELBAD & MASSAGE & WARMTE & INFRAROODLICHT**, om uw voeten door het vibreren van de massagenoppen ② op de bodem van het toestel te stimuleren en bovenindien zachte warmte en een revitaliserend bubbelpad in te schakelen. Het infraroodlichtveld ⑤ is ook geactiveerd en geeft een weldoende warmte af.
- De instelling **BUBBELBAD & WARMTE** activeert alleen de bubbelpad- en de warmtefunctie.
- De instelling **MASSAGE & INFRAROODLICHT** activeert de massagefunctie door de massagenoppen ② en ook het infraroodlichtveld ⑤. Die instelling kan ook zonder water worden gebruikt.

Na gebruik de functieschakelaar ① in stand ① (UIT) schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact giet het water uit het voetbubbelpad weg. Om het te legen, kipt u het toestel in een zodanige positie dat het water door de afloop achteraan kan weglopen.

Bijkomende massagetoepassing

Het **medisana** voetbubbelpad biedt u naast de al beschreven toepassingsmogelijkheden ook nog een massagemogelijkheid met gebruik van water, zonder het toestel te activeren. Massageroller ③: Rol met uw voetzolen over de massagerollen met een intensiteit die voor u aangenaam aanvoelt. Dit bevordert de doorbloeding en heeft een revitaliserende werking op uw voeten.

Bijkomende pedicurehulpstukken

Met het voetbubbelpad van **medisana** kunt u bovenindien telkens een van de drie meegeleverde pedicurehulpstukken gebruiken. Plaats het hulpstuk om eelt te verwijderen de borstel of het passagerehulpstuk ④. De beide pedicurehulpstukken die u niet nodig heeft kunt u op de houder voor pedicurehulpstukken zetten ④ zetten. Wrijf nu zachtjes met uw voeten op de plek waar het pedicurehulpstuk opgezet wordt ⑥. Zet niet te veel druk. Wenst u een ander deel van de voet te behandelen, hoeft u alleen maar uw voet te verplaatsen. Met het borsthulpstuk en het massagehulpstuk kunnen de voetzolen worden gemasseerd en het hulpstuk voor de verwijdering van eelt is geschikt om de eelt op een zachte manier te verwijderen.



TIP

De afgestorven huidschilfers kunnen met het hulpstuk voor eeltverwijdering erg makkelijk worden verwijderd na een voetbad, wanneer de huid erg zacht is.

Reiniging en onderhoud

- Koppel het netsnoer los van de wandcontactdoos en schakel het instrument uit voordat u het reinigt.
- Giet eldt water weg en maak het afgekoelde toestel goed schoon met een doekje of eventueel met een geschikt desinfecterend middel.
- Gebruik geen agressieve stoffen zoals bijvoorbeeld verdunning of schuurmelk bij het schoonmaken. Dat kan het oppervlak aantasten.
- Bewaar het instrument op een droge en koele plek.
- Wikkel het netsnoer zorgvuldig op, om kabelbreuk te voorkomen.

WAARSCHUWING

Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen.
Zij kunnen er in stikken!

Hartelijk dank

vóór uw vertrouwen en nog van harte gefeliciteerd!

Met het voetbubbelpad van **medisana** kunt u uw voeten na een lange dag heerlijk verwennen en tot rust laten komen. U kunt voor een voetbad met massage ongeveer 10 tot 15 minuten de tijd nemen en dagelijks 1 à 2 maal gebruik ervan maken. U moet er echter op letten dat het apparaat na ieder gebruik volledig afgekoeld is, voordat het weer gebruikt wordt!

i

Het **medisana** voetbubbelpad is geschikt voor gebruik met water. U kunt het toestel met warm of koud water vullen. De warmtefunctie zorgt echter niet voor het verwarmen van het water, maar zorgt ervoor dat het water niet zo snel afkoelt.

Afvalbeheer

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

Technische specificaties

Benaming en model:	medisana Voetbubbelpad
Type	FS-90L
Stroomverzorging:	220-240V~ 50/60Hz
Nominale uitvoer:	80 W
Afmetingen:	ca. 41 x 35 x 18,5 cm
Gewicht:	ca. 1,5 kg
Artikel-nummer:	92070 / 92071 (IAN 499375_2204)
EAN-nummer:	40 15588 92070 7 40 15588 92071 4

In het kader van permanente productverbeteringen zijn technische en vormgevende wijzigingen voorbehouden.

De actuele versie van deze gebruiksaanwijzing vindt u op www.medisana.com

Garantie- en reparatiebepalingen

Garantie van medisana GmbH: Geachte klant, U krijgt op dit toestel 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. In het geval van defecten aan dit toestel hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Afwikkeling bij garantiegeval

Om een snelle bewerking van uw verzoek te waarborgen, gelieve de volgende aanwijzingen op te volgen:

- Als er functiestoeringen of andere defecten optreden, neem dan eerst met het hierna genoemde servicepunt telefonisch of via e-mail op.
- Gelieve voor alle aanvragen kassabon en artikelnummer IAN 499375_2204 als bewijs voor de aankoop bij de hand te hebben.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan door het bijvoegen van het aankoopbewijs (kassabon) en de vermelding waaruit het defect bestaat en wanneer het opgetreden is, voor u portvrij naar het aan u door het servicepunt meegedeelde serviceadres sturen.

Garantiebepalingen

De garantietijd begint met de aankoopdatum. Gelieve de originele kassabon goed te bewaren. Dit document is vereist als bewijs voor de aankoop. Treedt er binnen drie jaar vanaf aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout op, dan wordt het product door ons, naar onze keuze, voor u gratis gerepareerd of vervangen. Deze garantieprestatie veronderstelt dat binnen de termijn van drie jaar het defecte toestel en het aankoopbewijs (kassabon) voorgelegd en schriftelijk kort beschreven wordt waaruit het defect bestaat en wanneer het opgetreden is. Als het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Met reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantieperiode.

Eventueel reeds bij de aankoop voorhanden schade en defecten moeten onmiddellijk na het uitpakken gemeld worden. Aan reparaties die na het verstrijken van de garantietijd uitgevoerd moeten worden, zijn kosten verbonden. De garantieprestatie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die aan normale slijtage blootgesteld zijn en daarom als slijtdelen beschouwd kunnen worden, zoals bijv. batterijen, accu's of voor schade aan breekbare delen, bijv. schakelaars of onderdelen van glas. Deze garantie vervalt als het product beschadigd, niet reglementair gebruikt of onderhoud werd. Voor een deskundig gebruik van het product moeten alle in de bedieningshandleiding beschreven aanwijzingen nauwgezet nageleefd worden. Gebruiksdoeleinden en handelingen, waarvan in de bedieningshandleiding aferaden of waarvoor gewaarschuwd wordt, moeten absoluut vermieden worden. Het product is enkel voor het privé- en niet voor het commerciële gebruik bestemd. Bij misbruik of ondeskundige behandeling, geweld en bij ingrepen die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal uitgevoerd werden, vervalt de garantie.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, Duitsland

Servicefiliaal IAN 499375_2204

